


Oszillierende Sägeblätter für die Knochenchirurgie

GOMINA
SWISS QUALITY



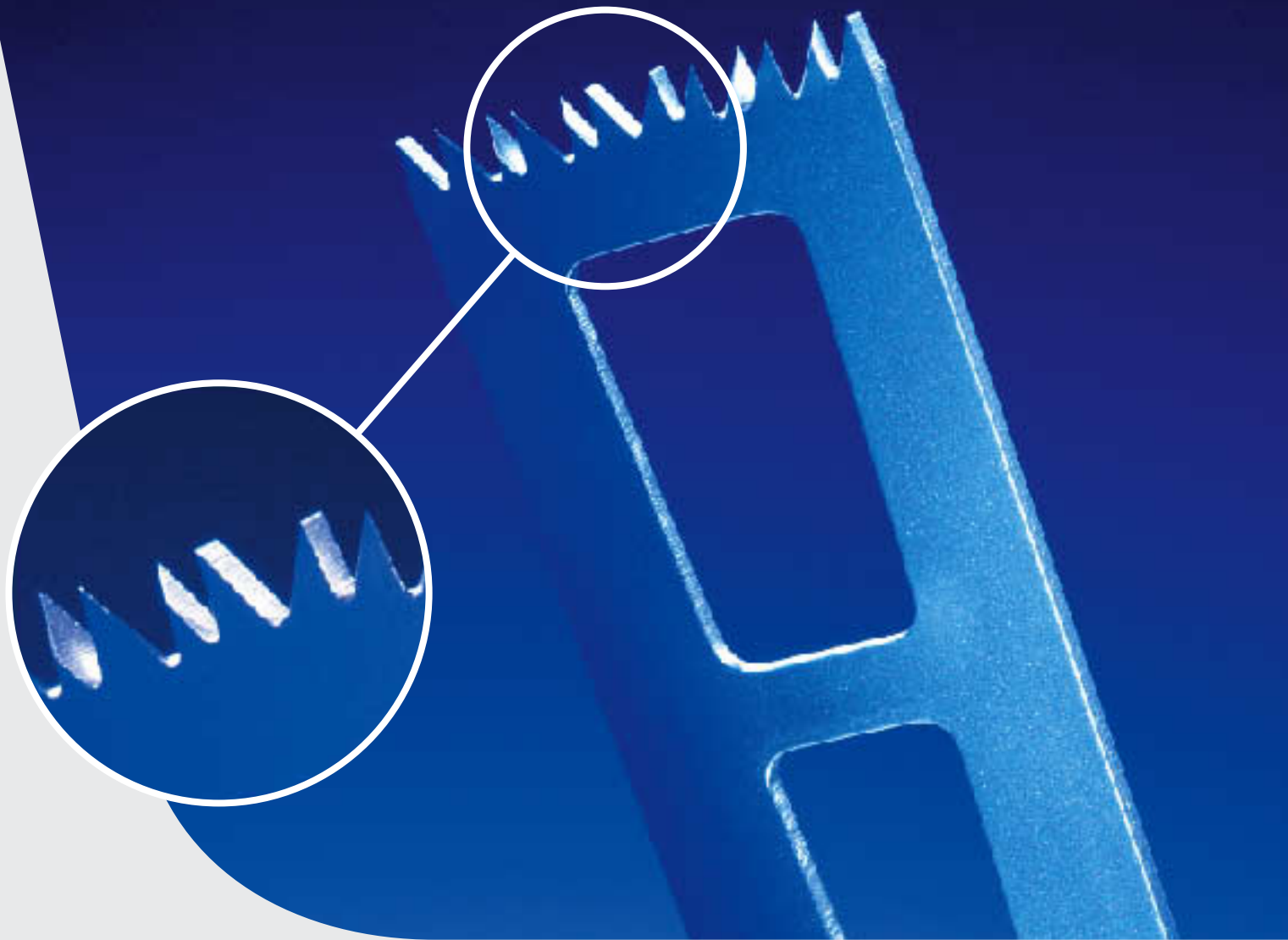

Weltneuheit von Gomina

Gomina ist es erstmals gelungen, eine Zahngeometrie für oszillierende Sägeblätter zu entwickeln, die eine Kombination von geschliffenen Schneide- und Räumzähnen aufweist. Diese einmalige Kombination von Sägezähnen führt zu hervorragenden Schneidleistungen. Kürzere Sägezeiten und geringer Temperaturanstieg am Sägeblatt sind die entscheidenden Vorteile. Mit den in Diamantform geschliffenen Schneidezähnen wird ein Schnitt mit hoher Oberflächenqualität erzielt und mit den ebenfalls geschliffenen Räumzähnen wird der Schnittspalt ausgeräumt.

Mit der neuartigen Zahngeometrie und der gewählten Zähneanordnung wird zudem das seitliche Ausbrechen beim Sägen minimiert, dies erlaubt dem Operateur eine einfachere Handhabung.

GOMINA AG Raiftstrasse 4, CH-3989 Niederwald

Telefon ++41 (0)27 970 12 70, Fax ++41 (0)27 970 12 75. www.gomina.ch, info@gomina.ch